

オプション



センサー式ソープ&アルコール ディスペンサー

DKI-SD-200K/DKI-SD-200U/DKI-SD-200E
電源：AC100V 50/60Hz

- ノータッチセンサー
- ソープとアルコールを選択可能
- ノズルの交換でアルコールの噴霧吐出にも対応
- 薬液の液だれがない吸い上げ方式
- 薬液吐出量はレバーで簡単に調節可能



ブラシケース BR-1A

センサー式ブラシケース架台

DKI-BR-100
電源：AC100V 50/60Hz

- センサーに手を近づけると自動でブラシが出ます
- スムーズな動きのモーター駆動
- 清潔で耐久性のあるオールステンレス製



ワイペルホルダー

DKI-RD370
電源：AC100V 50/60Hz

- 紫外線ランプの照射でホルダー内を清潔に保ちます
- 手はさみ防止の安全装置を内蔵
- 取り出しやすい回転式の取り出し口
- 交換部品は紫外線ランプのみで低ランニングコスト



サラヤ株式会社の
薬液ディスペンサーも取り付け可能です。
詳しくは弊社担当者にご相談ください。

加圧ポンプ

コンパクトな専用のラインポンプです。
供給圧が低い場合に、加圧することができます。



COOPDECH

医療用手洗い水装置ステリキープ® II

SAUBER ZONE® ザウバーゾーン® STAINLESS SERIES ステンレスシリーズ



管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
一般的名称：殺菌水製造装置
医療機器承認番号：20500BZZ01161000
販売名：医療用手洗い水装置ステリキープII カバータイプ

管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
一般的名称：殺菌水製造装置
医療機器承認番号：20500BZZ01042000
販売名：医療用手洗い水装置ステリキープII 壁掛けタイプ

 大研医器株式会社

COOPDECH、クーデック、SAUBER ZONE、ザウバーゾーン、WIPELL、ワイペルは、大研医器株式会社の登録商標です。

製造販売業者

 大研医器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2
TEL 0725-30-3150
（製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください）
札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店




この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2019.7

カタログ記載内容2019年7月現在
(1907B)

医療用手洗い水装置ステリキープ® II

無菌水を安定供給する精密ろ過システムです。
蛇口からの逆汚染もシャットアウトします。

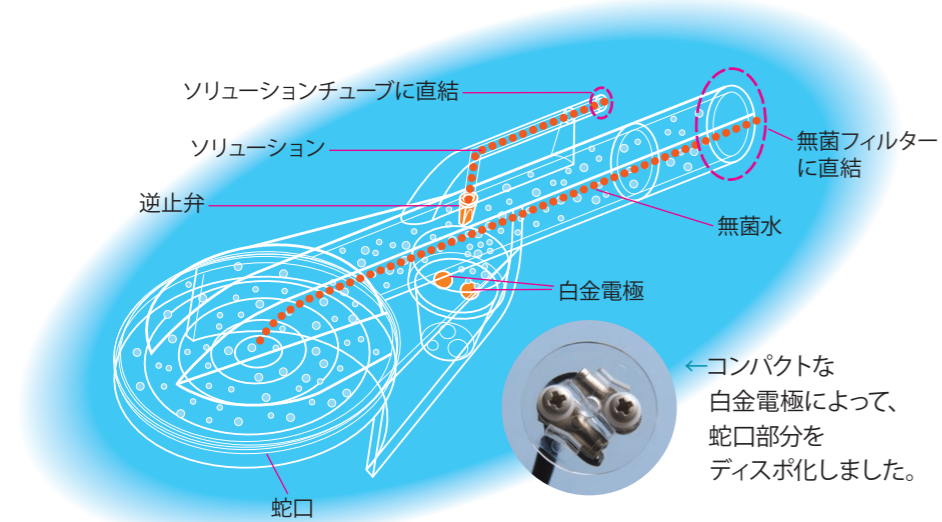


コンピューター制御の電気分解で次亜塩素酸ナトリウムを生成し、毎日定時に蛇口を殺菌します。
蛇口直前でろ過することにより、貯水槽や配管内での再汚染の無い無菌水を提供します。

〈制御パネル〉



- 毎日の電気分解および殺菌をモニタリングします。
- 無菌フィルターの交換時期などをお知らせします。
- 蛇口に触れてしまったときなどは、手で殺菌ができます。
- タイマー機能で手洗い時間の管理ができます。

〈内部〉

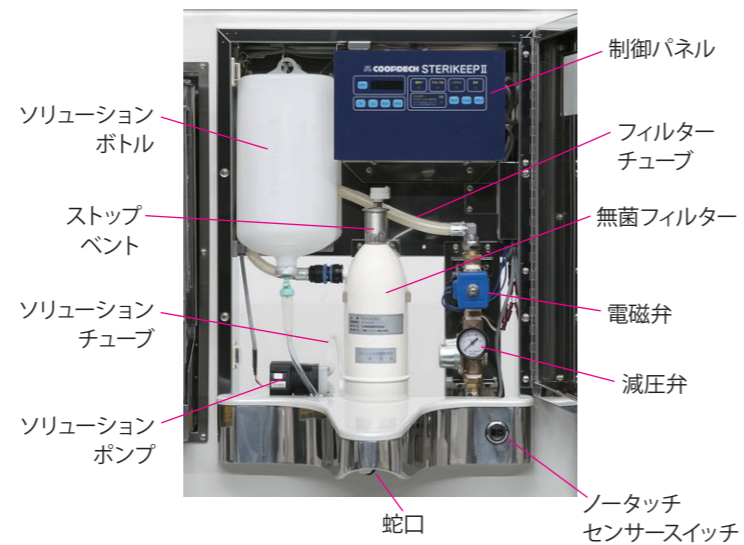


ステリキープ II キット

DKI-SK2C-K

〈セット内容〉

- 細菌ろ過フィルター (モジュール/PES-3281)
- ソリューションボトル (電気分解用)
- ストップベント
- ステリキープ II 用シャワー蛇口セット


必要な交換部品をワンパッケージで提供します。

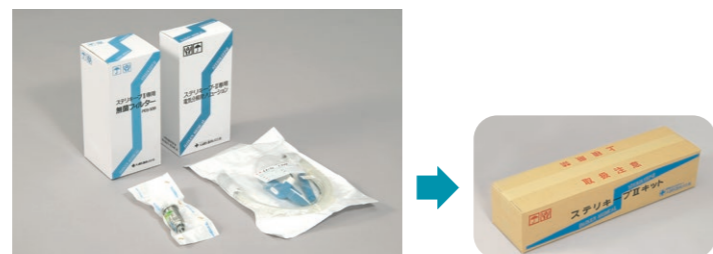

SAUBER ZONE® ザウバーゾーン®

シンク形状や蛇口の高さを工夫し、疲れにくさと使いやすさを追求しました。

腰、股関節、膝への負担を軽減

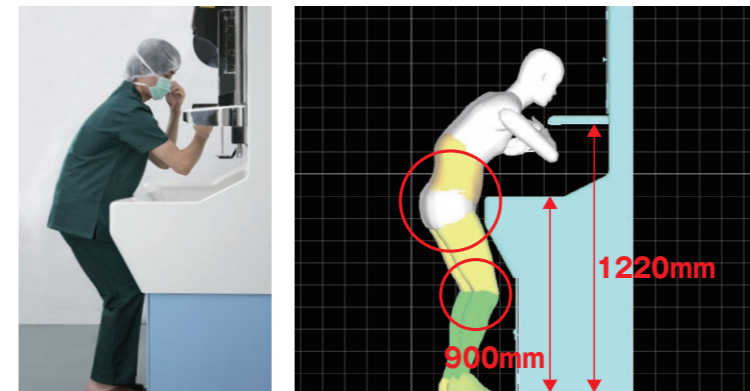

デジタルヒューマン技術※の導入で、より疲れにくく使いやすい蛇口やシンクの高さを実現。腰、股関節、膝への負担が軽減されました。

※デジタルヒューマン技術はパナソニック(株)解析センターのシミュレーションシステムです。


継ぎ目のない一体型シンクとソフトシャワー




広い手洗い空間を確保した新設計のシンクは、継ぎ目がなく清掃が簡単です。

滑らかな流水のソフトシャワーです。

清掃性とメンテナンス性を向上

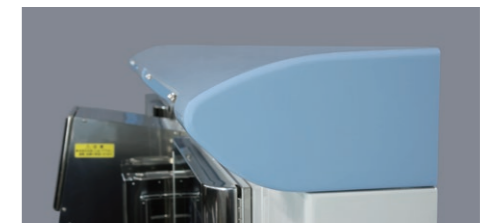

天井面はホコリが溜まりにくく、掃除がしやすいラウンド形状です。

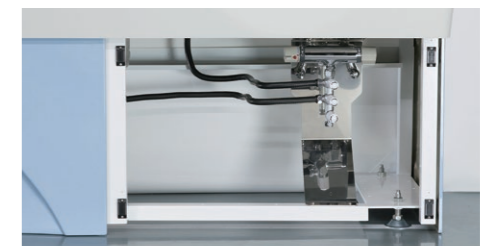

シンク下に広いスペースを確保し、清掃やミキシングバルブの操作がしやすくなりました。

LED照明



省エネ・長寿命のLED照明を標準装備しました。

STAINLESS SERIES ステンレスシリーズ


清潔で耐久性のあるステンレス仕様です。



シンク手前側の面や縁の角度で、水の飛び散りや水滴のこぼれ出を防止します。

SAUBER ZONE® ザウバーゾーン®

1人用手洗いユニット (DKI-SK21-ZS) 2人用手洗いユニット (DKI-SK22-ZS) 3人用手洗いユニット (DKI-SK23-ZS) 壁掛けタイプ (DKI-SK2F)

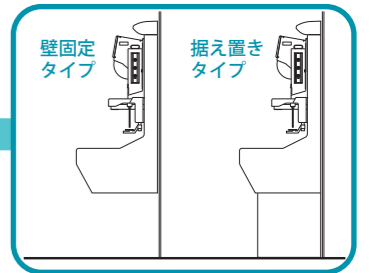

壁掛けタイプ (DKI-SK2F)


※壁掛けタイプのカラーは、写真のペールホワイトのみです。

2人用手洗いユニット (DKI-SK22-ZS)

1人用手洗いユニット (DKI-SK21-ZS)

仕様

ザウバーゾーンは、壁掛けタイプ・壁固定タイプ・据え置きタイプの3タイプから選べます。

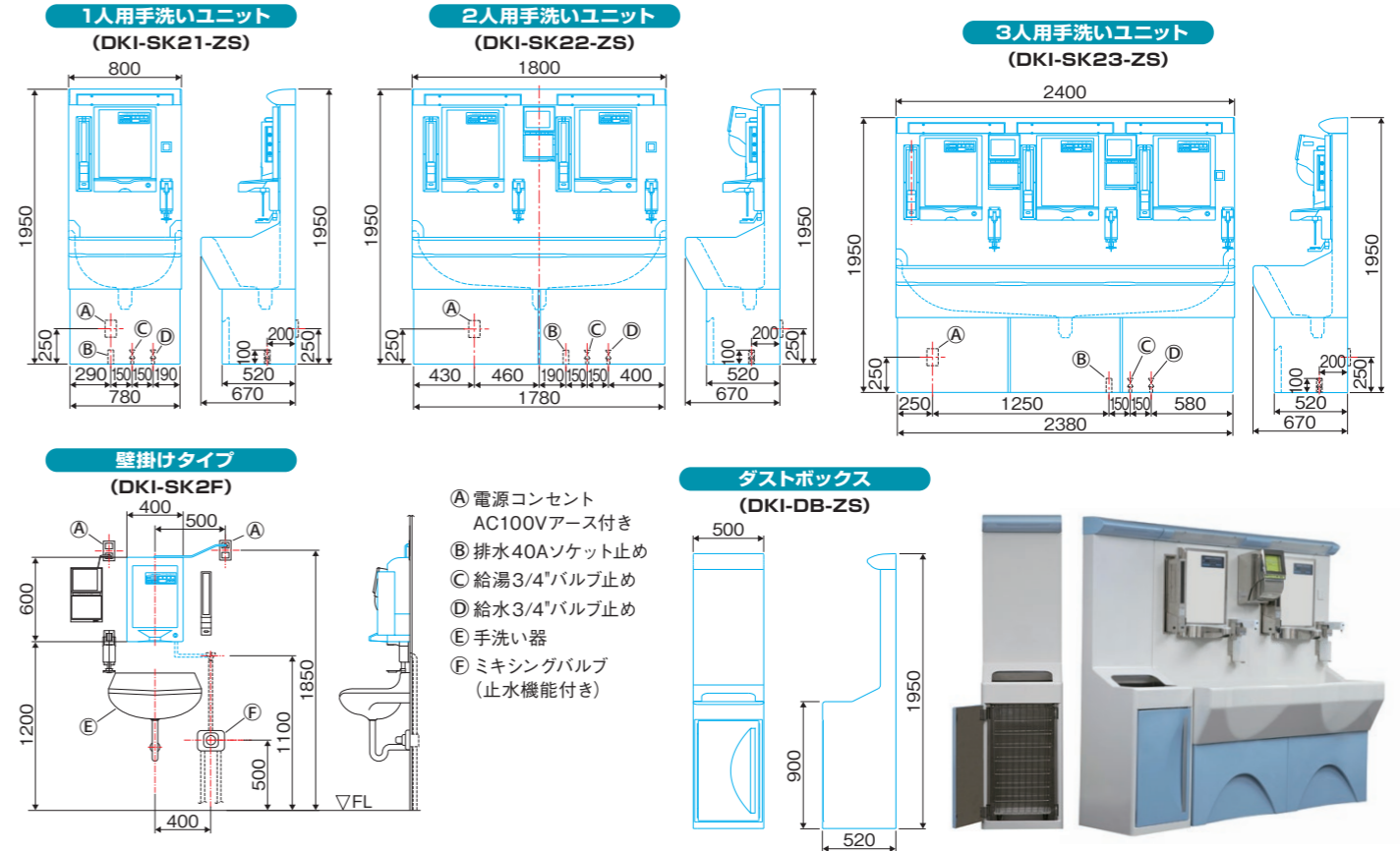

設置例

豊富な付属品を配置可能です。カラー・形状等の特注についても弊社担当者にご相談ください。



タイプ	1人用手洗いユニット	2人用手洗いユニット	3人用手洗いユニット	壁掛けタイプ	ダストボックス
品番	DKI-SK21-ZS	DKI-SK22-ZS	DKI-SK23-ZS	DKI-SK2F	DKI-DB-ZS
本体外形寸法	800W×1,950H×670D	1,800W×1,950H×670D	2,400W×1,950H×670D	400W×600H×160D	500W×1,950H×520D
入力電力	AC100V 50/60Hz(アース付き)				
消費電力	100VA	200VA	300VA	40VA	
ミキシングバルブ	サーモスタット付きミキシングバルブ				
所要給水圧	200kPa以上 350kPa以下				
所要給湯圧	200kPa以上 350kPa以下				
本体側給水管径	1/2" (15A)				
本体側給湯管径	1/2" (15A)				
本体側排水トラップ	防臭排水トラップ				
処理方法	超精密ろ過 (医療用手洗い水装置ステリキープIIカバータイプを標準装備)			超精密ろ過	
モジュール使用数	1本	2本	3本	1本	
水処理能力	6L/min ±10%	12L/min ±10%	18L/min ±10%	6L/min ±10%	
逆汚染防止蛇口	電気分解による逆汚染防止蛇口				
出水方式	ノータッチセンサースイッチ				
ワイベルホルダー		1台	2台		
センサー式ソープディスペンサー	1台	2台	3台		
ブラシケース	1台	2台	3台		
センサー式ブラシケース架台	1台	2台	3台		
LED照明	1台	2台	3台		
本体材質	FRP製				
総重量	約105kg	約175kg	約230kg	約20kg	約60kg

●使用前に添付文書および取扱説明書をよくお読みください。
●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 ●特注サイズ・仕様については、弊社担当者にご相談ください。

ザウバーゾーンのカラーコーディネート。標準4色のカラーからお選びください。

ベビーブルー ミントグリーン ペールホワイト パステルピンク



STAINLESS SERIES ステンレスシリーズ

1人用手洗いユニット (DKI-SK21-AS-W) 2人用手洗いユニット (DKI-SK22-AS-W) 3人用手洗いユニット (DKI-SK23-AS-W) 壁掛けタイプ (DKI-SK2W) 据え置きタイプ (DKI-SK2W)




2人用手洗いユニット
(DKI-SK22-AS-W)

壁掛けタイプ
(DKI-SK2W)

仕様

ステンレスシリーズは、壁掛けタイプと据え置きタイプの2タイプから選べます。

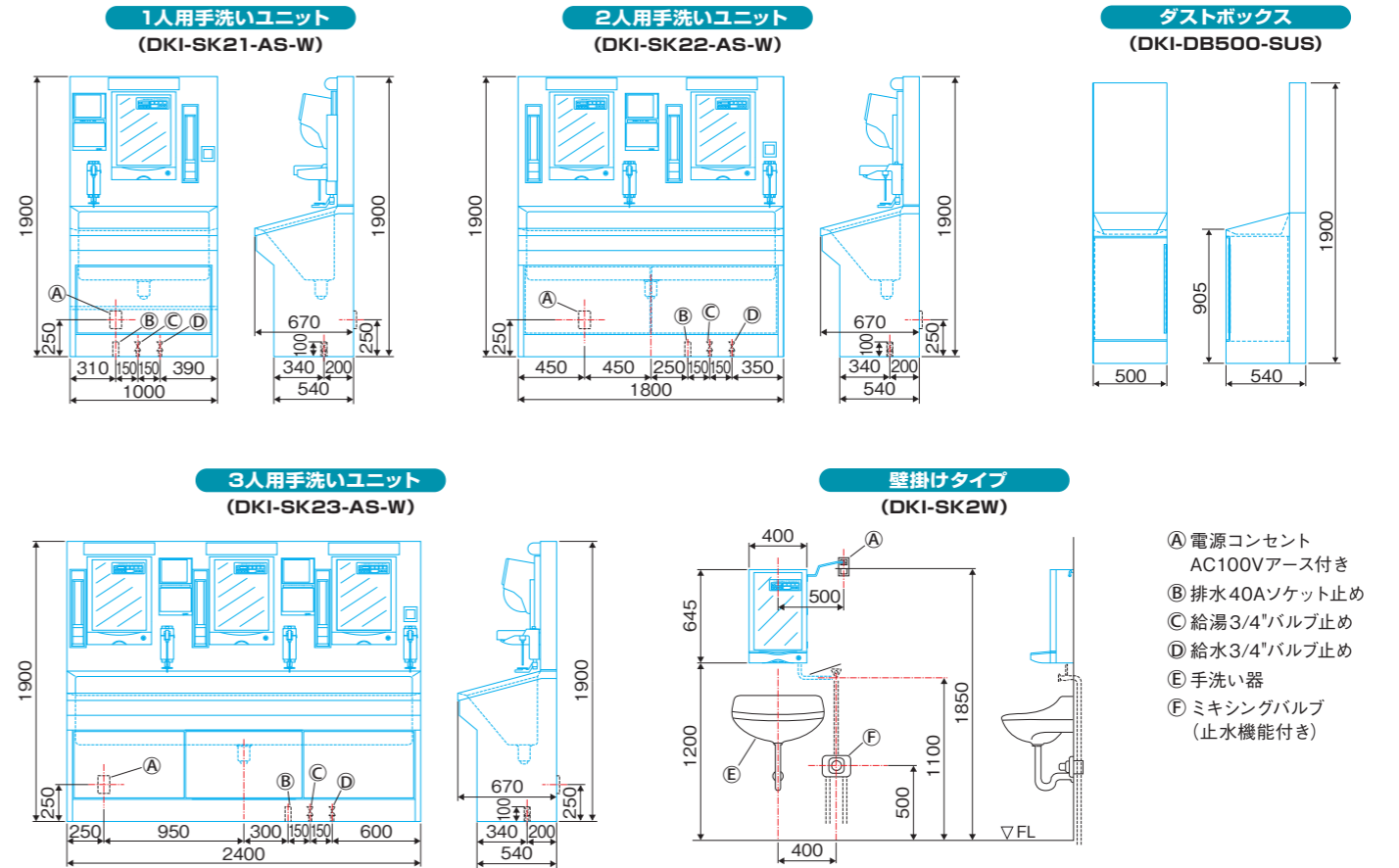

設置例

豊富な付属品を配置可能です。形状等の特注についても弊社担当者にご相談ください。



タイプ	1人用手洗いユニット	2人用手洗いユニット	3人用手洗いユニット	壁掛けタイプ	ダストボックス
品番	DKI-SK21-AS-W	DKI-SK22-AS-W	DKI-SK23-AS-W	DKI-SK2W	DKI-DB500-SUS
本体外形寸法	1,000W×1,900H×670D	1,800W×1,900H×670D	2,400W×1,900H×670D	400W×645H×160D	500W×1,900H×540D
入力電力	AC100V 50/60Hz (アース付き)				
消費電力	110VA	180VA	270VA	40VA	—
ミキシングバルブ	サーモスタット付きミキシングバルブ				—
所要給水圧	200kPa以上 350kPa以下				
所要給湯圧	200kPa以上 350kPa以下				
本体側給水管径	1/2" (15A)				—
本体側給湯管径	1/2" (15A)				—
本体側排水トラップ	防臭排水トラップ				—
処理方法	超精密ろ過 (医療用手洗い水装置ステリキープIIカバータイプを標準装備)				超精密ろ過
モジュール使用数	1本	2本	3本	1本	—
水処理能力	6L/min ±10%	12L/min ±10%	18L/min ±10%	6L/min ±10%	—
逆汚染防止蛇口	電気分解による逆汚染防止蛇口				
出水方式	ノータッチセンサースイッチ				
ワイベルホルダー	1台	1台	2台	—	—
センサー式ソープディスペンサー	1台	2台	3台	—	—
ブラシケース	1台	2台	3台	—	—
センサー式ブラシケース架台	1台	2台	3台	—	—
LED照明	1台	2台	3台	—	—
本体材質	ステンレス製 (SUS 304)				
総重量	約110kg	約190kg	約270kg	約20kg	約60kg

● 使用前に添付文書および取扱説明書をよくお読みください。
 ● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 ● 特注サイズ・仕様については、弊社担当者にご相談ください。