

SURGICAL TOWEL

WIPELL®

ワイペルホルダー/ワイペルタオル

■ワイペルホルダー

- 紫外線ランプによる照射で、ホルダー内はいつも清潔に保たれます。
- 手はさみを防止する安全装置を新たに採用。また、従来製品に比べコンパクトになりました。(当社比)
- ワイペルタオルの取り出し口は回転方式を採用することにより、広く大きく取り出しやすくなりました。
- 紫外線ランプを交換するだけの低ランニングコストです。

■ワイペルタオル

- 滅菌済ディスポーザブルタオルです。従来の再生ガーゼや再生タオルでのクリーニング等の手間を省きます。
- 高い吸水性能で、速やかに確実な拭き取りが行えます。
- 摩擦による脱落繊維がほとんどなく、繊維が手に残らず安全です。
- 乾燥時・湿潤時を問わず柔らかく適度な伸びがあるため、肌へのフィット性がよく、優れた拭き取り効果が得られます。



COOPDECH

SURGICAL TOWEL WIPELL®

Front door 前面扉

ワイペルタオルの残量が一目で確認できます。
新しいタオルとの交換は、前面扉を開けることにより容易に行なえます。
また、滅菌包装を破りながら同時に行えるので、操作は清潔かつ迅速です。

Rotation door 回転扉

光センサーによって開閉するワイペルタオル取り出し口は、
回転方式により広く大きく取り出しやすくなりました。
また、手はさみを防止する安全装置を新たに採用しました。

Wipell Stand ワイペルスタンド


安定性に優れ、高さ調節も簡単なスタンドです。ワイペルホルダースタンド式に
セットされています。(ワイペルホルダー壁掛け式はオプション)

Basket バスケット

ワイペルスタンドのフックに吊り下げて使用する清潔で丈夫な
ステンレス製の専用バスケットです。(オプション)

Wipell Towel ワイペルタオル

従来の不織布に比べ、吸水性能が飛躍的に向上。拭き取り時間を大幅に
短縮し、拭き残しを解消しました。不織布は摩擦による繊維の脱落が多
くみられましたが、ワイペルタオルは有害な接着剤(バンダー)を一切
使用せずに、脱落繊維(リント)や発塵をほとんどなくしました。また縦
横に強く、破れや必要以上の伸びもありません。ワイペルタオルは、理想的な性能を備えたサ
ージカルタオルです。
EOG滅菌済。

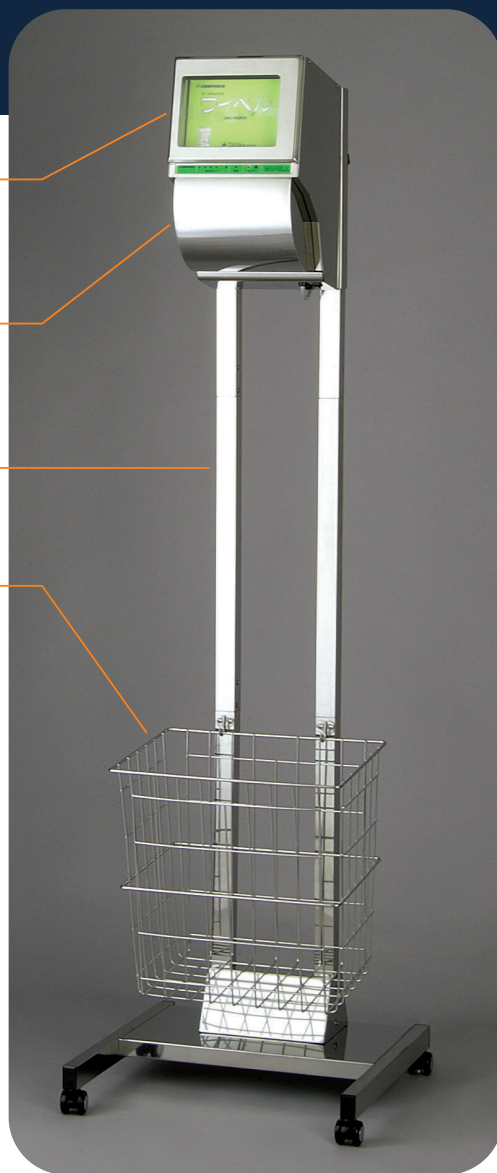

仕様および価格

| 品名 | ワイペルホルダー壁掛け式 | ワイペルホルダースタンド式 |
|------------|------------------------|----------------------|
| 品番 | DKI-RD370 | DKI-RD370S |
| 使用温度 | 10~40℃ | |
| 使用湿度 | 30~75% | |
| 紫外線ランプ | GL-4×2本 | |
| 紫外線ランプ使用時間 | 2,000時間 | |
| 安全装置 | 手はさみ検知スイッチ、回転扉トルクリミッター | |
| 材質 | ステンレス製(SUS304) | |
| 外形寸法 | W225×D265×H345(mm) | W500×D500×H1,777(mm) |
| 重量 | 6.9kg | 17.7kg |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 25W | |
| 希望小売価格(税別) | 290,000円 | 375,000円 |

- 記載の希望小売価格には消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

| 品名 | ワイペルタオル |
|------------|---------------|
| 品番 | DKI-RD306 |
| 寸法 | W150×L500(mm) |
| 入数 | 60枚/箱、20箱/ケース |
| 備考 | EOG滅菌済 |
| 希望小売価格(税別) | 47,000円 |

オプション部品

| 品名 | バスケット | ワイペルスタンド |
|------------|--------------------|----------------------|
| 品番 | DKI-RD359 | DKI-RD375 |
| 材質 | ステンレス製(SUS304) | |
| 外形寸法 | W400×D300×H400(mm) | W500×D500×H1,777(mm) |
| 重量 | 1.4kg | 10.8kg |
| 希望小売価格(税別) | 20,000円 | 90,000円 |

COOPDECH、クーデック、WIPELL、ワイペルは、大研医器株式会社の登録商標です。

製造販売業者

 **大研医器株式会社**
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150
(製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください)
札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
大阪支店 〒540-0036 大阪府中央区船越町1-6-6 ODC天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アルビル5F TEL 092-481-1751
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2024.1

カタログ記載内容2024年1月現在
2401B